


MA FICHE MÉMO



La thérapie par pression négative

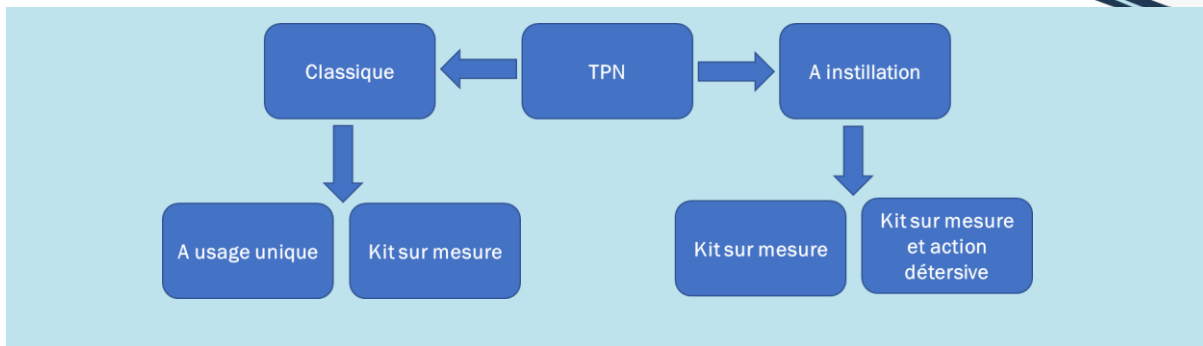

La T.P.N. classique

Absorption : variable (hydrocellulaire et réservoir aux volumes variés)	Fond de plaie : 	Symbole :
Description : kits à UU, sous formes de pansement adhésif/adhérent aux formes géométriques avec ou non un réservoir externe. Kits sur mesure adaptés à la taille de toute plaie, toujours raccordés à un réservoir		
Précaution d'usage : si thérapie inactive > 2h (kit sur mesure) ou > 24h (kit usage unique) retirer dispositifs (risque infectieux en anaérobiose)		
Exemples : PICO, Avance Solo/Adapt, ActiVAC		

La T.P.N. à instillation

Absorption : réservoir allant de 300 à 500 mL 	Fond de plaie : 	Symbole :
Description : kit sur mesure adapté à tout type de plaie, protection des structures nobles (os, cartilage, tendons), favorise la détersion autolytique		
Précaution d'usage : si thérapie inactive plus > 2h (kit sur mesure) retirer dispositifs (risque infectieux en anaérobiose)		
Exemples : VAC Véraflo		

MA FICHE MÉMO



La T.P.N. à instillation avec action détersive

Absorption : réservoir allant de 300 à 500 ml



Fond de plaie :



Symbole :



Description : kit sur mesure adapté à tout type de plaie avec mousses détersives

Précaution d'usage : si thérapie inactive > 2h (kit sur mesure) retirer dispositifs (risque infectieux en anaérobiose)

Exemples : VAC Cleanse, VAC Cleanse choice