


MA FICHE MÉMO



Autres pansements complexes

Pansements gras

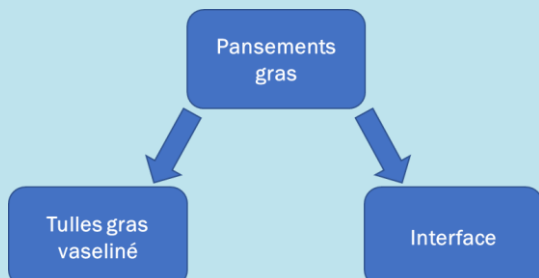

Tulle gras vaseliné

Absorption : 	Fond de plaie : 	Symbole :
Description : constitué trame de cellulose, à mailles larges, enduite de vaseline (effet filmant)		
Précaution d'usage : passé 24h, retrait peut être traumatique car mailles peuvent s'incruster entre les bourgeons, de plus la vaseline est absorbée par le milieu et le pansement secondaire. NON recommandé (HAS 2001) pour plaies chroniques		
Exemples : Jelonet, Grassolind		

Interfaces

Absorption : 	Fond de plaie : 	Symbole :
Description : trames à mailles serrées enduites de polymères « gras » (vaseline, paraffine, silicone, lipido-colloïde)		
Précautions d'usages : retrait atraumatique, permanence du corps gras, laissé jusqu'à 1 sem (changement pansement secondaire seulement)		
Exemples : Jelonet Plus, Adaptic, Mépittel, Urgotul.		

Hydrocolloïdes

Absorption : 	Fond de plaie : 	Symbole :
Description : 2 parties : 1 adhésive en contact avec la plaie constituée de polymère absorbant (CMC) et 1 toit semi-perméable. Existe sous forme de plaque + ou - épaisse, de poudre et pâte		
Précautions d'usage : trop occlusif pour plaies infectées, effet « pus-like » si retiré à saturation, décollement comme les films de polyuréthane (en étirant), mauvaise adhérence sous contrainte mécanique		
Exemples : Comfeel, Duoderm		

MA FICHE MÉMO



Les grands autolytiques

Hydrogel



Absorption : 	Fond de plaie : 	Symbole : 
--	---	---

Description : contient + de 50% d'eau, destiné à l'humidification des plaies. Existe sous forme de tube, seringue, pipette, plaque et tulle

Précaution d'usage : à utiliser avec pansement secondaire non absorbant, faire scarification préalable de la nécrose, à appliquer au centre de la plaie (sillon d'élimination)

Exemples : Intrasite, Purilon, Duoderm gel

Irrigo-absorbant


Absorption : 	Fond de plaie : 	Symbole : 
--	---	---

Description : humidification par solution de Ringer-lactate et absorption par cœur de polyacrylate de sodium. Détersion non traumatique.

Précaution d'usage : à utiliser avec pansement secondaire non absorbant, faire scarification préalable de la nécrose, à appliquer au centre de la plaie (sillon d'élimination)

Exemples : Hydroclean advance, Hydroclean cavity, Hydroclean mini.

Les antimicrobiens

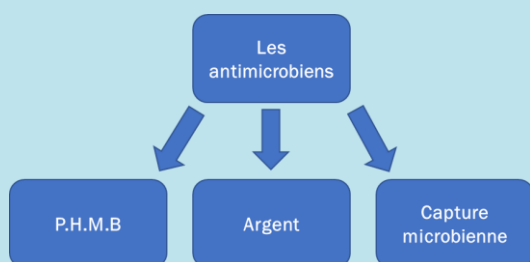



Argent

Absorption : variable	Fond de plaie : 	Symbole : 
------------------------------	---	---

Description : agent à visée antimicrobienne associé à forme de pansement

Exemples : Aquacel Ag+, Urgotul Ag.



P.H.M.B

Absorption : variable	Fond de plaie : 	Symbole : 
------------------------------	---	---

Description : poly-héxa-méthylène-biguamide, antiseptique à bas indice de bio-toxicité par rapport aux gammes traditionnellement utilisées (polyvidone iodée et chlorhexidine). En solution, gel, compresse et hydrocellulaire

Exemples : Kerlix AMD, Prontosan gel, Kendall FOAM AMD

Capture microbienne

Absorption : variable	Fond de plaie : 	Symbole : 
------------------------------	---	---

Description : dispositif sans principe actif, diverse forme de pansement, trame hydrophobe d'acide gras spécialisée dans la fixation des bactéries sur sa trame (« effet papier-attrape mouche »)

Exemples : gamme Sorbact